

ValukineTM ELISA kit

Mouse IL-17 Immunoassay

Catalog Number: VAL610

For the quantitative determination of mouse interleukin 17 (IL-17) concentrations in cell culture supernates.

This package insert must be read in its entirety before using this product.

**FOR RESEARCH USE ONLY.
NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES.**

TABLE OF CONTENTS

Contents	Page
INTRODUCTION.....	3
PRINCIPLE OF THE ASSAY.....	3
LIMITATIONS OF THE PROCEDURE.....	4
MATERIALS PROVIDED.....	4
STORAGE.....	4
OTHER SUPPLIES REQUIRED.....	4
PRECAUTION.....	5
SAMPLE COLLECTION AND STORAGE.....	5
REAGENT PREPARATION.....	5
ASSAY PROCEDURE.....	5
CALCULATION OF RESULTS.....	6
TYPICAL DATA.....	7
TECHNICAL HINTS.....	7
PRECISION.....	8
RECOVERY.....	8
SENSITIVITY.....	8
SAMPLE VALUES.....	8
LINEARITY.....	8
CALIBRATION.....	9
SPECIFICITY.....	9
REFERENCES.....	10
PLATE LAYOUT.....	11

MANUFACTURED BY:

R&D Systems, Inc.
614 McKinley Place NE
Minneapolis, MN 55413
United States of America

DISTRIBUTED BY:

R&D Systems China Co. Ltd.
24A1 Hua Min Empire Plaza
726 West Yan An Road
Shanghai PRC 200050

TELEPHONE: +86 (21) 52380373
FAX: +86 (21) 52371001
E-MAIL: info@RnDSystemsChina.com.cn

INTRODUCTION

Mouse Interleukin 17 (IL-17; also IL-17A and CTLA-8) is a 21 kDa, variably glycosylated polypeptide that belongs to the IL-17 family of cytokines containing a cysteine-knot fold (1 - 3). Its sequence was originally isolated from an activated hybridoma created from the fusion of a mouse cytotoxic and rat T cell lymphoma cell line (2 - 5). It is synthesized as a 158 amino acid (aa) precursor that contains a 25 aa signal sequence and a 15 kDa, 133 aa mature segment (5). In both mouse and human, there is one conserved N-linked glycosylation site that likely contributes 5 kDa to its native molecular weight. IL-17A forms both a 35-38 kDa homodimer, and a 45-48 kDa heterodimer with IL-17F (6, 7). Mature mouse IL-17A is 61% and 89% aa identical to human and rat IL-17A, respectively (4, 5, 8). While rodent and human mature sequences show modest aa sequence identity, human IL-17 is active on both mouse and rat cells (5, 9). Cells known to produce IL-17 are the CD4+ Th17 T cells, Paneth cells, GR1+CD11b+ myeloid suppressor cells, CD27- $\gamma\delta$ T cells, CD1+NK1.1- iNKT cells and CD3-CD4+ LTi-like cells (3, 5, 6, 10 - 12).

A high affinity receptor for mouse IL-17 has been reported, and appears to be a heteromultimer of IL-17RA and IL-17RC, likely in a 2:1 ratio (1). IL-17RA is a 130 kDa, type I transmembrane glycoprotein that bears no resemblance to members of the cytokine, TNF or immunoglobulin receptor superfamily (2, 10, 13). IL-17RC is also a type I transmembrane protein, approximately 90-95 kDa in size, that shares less than 30% aa identity with IL-17RA (14, 15). Both receptors are needed for IL-17A and IL-17A:F activity. The two receptors appear to form a functional association following ligand binding to IL-17RA (1, 16).

IL-17 is best known for its participation in the recruitment and survival of neutrophils (3, 10, 17, 18). Its induction was initially described to be the result of antigen stimulation of DC, resulting in IL-23 secretion. In a TCR-independent event, IL-23 induces T cell production of IL-17 (3). Once secreted, IL-17, in the bone marrow would seem to induce stromal/fibroblast expression of both G-CSF and stem cell factor (membrane form), an effect that increases PMN differentiation and production. IL-17 may complement this by directly blocking neutrophil apoptosis, promoting greater circulating PMN numbers (17). In the tissues, IL-17 would also seem to promote neutrophil extravasation, principally through its effects on macrophages and endothelial cells (EC). On macrophages, IL-17 induces TNF- α , IL-1 β and IL-6 production (19). TNF- α and IL-1 β then act on local ECs to induce G-CSF secretion, an effect that is potentiated by IL-17 (20). IL-17 further contributes to PMN influx by inducing EC CXCL chemokine release and NO production, which may increase vascular permeability (3, 9). IL-17 effects are not limited to neutrophils. In synovial joints, IL-17 upregulates RANKL expression on osteoblasts. This provides a stimulus for osteoclast formation and subsequent bone resorption (18).

PRINCIPLE OF THE ASSAY

This assay employs the quantitative sandwich enzyme immunoassay technique. A monoclonal antibody specific for mouse IL-17 has been pre-coated onto a microplate. Standards and samples are pipetted into the wells and any mouse IL-17 present is bound by the immobilized antibody. After washing away any unbound substances, an enzyme-linked polyclonal antibody specific for mouse IL-17 is added to the wells. Following a wash to remove any unbound antibody-enzyme reagent, a substrate solution is added to the wells and color develops in proportion to the amount of mouse IL-17 bound in the initial step. The color development is stopped and the intensity of the color is measured.

LIMITATIONS OF THE PROCEDURE

- **FOR RESEARCH USE ONLY. NOT FOR USE IN DIAGNOSTIC PROCEDURES.**
- The kit should not be used beyond the expiration date on the kit label.
- Do not mix or substitute reagents with those from other lots or sources.
- If samples generate values higher than the highest standard, dilute the samples with the Diluent 1X and repeat the assay.
- Any variation in operator, pipetting technique, washing technique, incubation time or temperature, and kit age can cause variation in binding.

MATERIALS PROVIDED

Description	Cat. # VAL610
Mouse IL-17 Microplate -96 well polystyrene microplate (12 strips of 8 wells) coated with a monoclonal antibody specific for mouse IL-17.	1 plate
Mouse IL-17 Conjugate -21 mL/vial of polyclonal antibody against mouse IL-17 conjugated to horseradish peroxidase with preservatives.	1 vial
Mouse IL-17 Standard -3.5 ng/vial of recombinant mouse IL-17 in a buffered protein base with preservatives; lyophilized.	1 vial
Diluent Concentrate 5X -21 mL/vial of a 5X concentrated buffered protein base with preservatives. For cell culture supernate samples.	1 vial
Wash Solution Concentrate 25X -21 mL/vial of a 25X concentrated solution of buffered surfactant with preservatives.	1 vial
Substrate A -12.5 mL/vial of stabilized hydrogen peroxide	1 vial
Substrate B -12.5 mL/vial of stabilized chromogen (tetramethylbenzidine)	1 vial
Stop solution 2 -23 mL/vial of diluted hydrochloric acid solution	1 vial
Plate Covers -Adhesive strips.	3 strips

VAL610 contains sufficient materials to run an ELISA on one 96 well plate.

STORAGE

Unopened Kit	Store at 2-8°C. Do not use past kit expiration date.	
Opened/ Reconstituted Reagents	Diluted Wash Solution	May be stored for up to 1 month at 2-8°C.*
	Stop solution 2	
	Diluent 1X	
	Conjugate	
	Unmixed Substrate A	
	Unmixed Substrate B	
	Standard	Aliquot and store for up to 1 month at -20 °C in a manual defrost freezer.* Avoid repeated freeze-thaw cycles.
Microplate Wells	Return unused wells to the foil pouch containing the desiccant pack, reseal along entire edge of zip-seal. May be stored for up to 1 month at 2-8°C.*	

*Provided this is within the expiration date of the kit.

OTHER SUPPLIES REQUIRED

- Microplate reader capable of measuring absorbance at 450 nm, with the correction wavelength set at 540 nm or 570 nm.
- Pipettes and pipette tips.

- Deionized or distilled water.
- Squirt bottle, manifold dispenser, or automated microplate washer.
- 500 mL graduated cylinder.

PRECAUTION

The Stop solution 2 provided with this kit is an acid solution. Wear eye, hand, face, and clothing protection when using this material.

SAMPLE COLLECTION AND STORAGE

Cell Culture Supernates - Remove particulates by centrifugation and assay immediately or aliquot and store samples at -20°C . Avoid repeated freeze-thaw cycles.

REAGENT PREPARATION

Bring all reagents to room temperature before use.


Wash Solution - If crystals have formed in the concentrate, warm to room temperature and mix gently until the crystals have completely dissolved. Dilute 20 mL of Wash Solution Concentrate into deionized or distilled water to prepare 500 mL of Wash Buffer.

Substrate Solution - Substrates A and B should be mixed together in equal volumes within 15 minutes of use. Protect from light. 100 μL of the resultant mixture is required per well.

Diluent 1X - Dilute 20 mL of Diluent Concentrate 5X into 80 mL of deionized or distilled water to prepare 100 mL of Diluent 1X.

Mouse IL-17 Standard - Reconstitute the mouse IL-17 Standard with 5 mL of Diluent 1X. This reconstitution produces a stock solution of 700 pg/mL. Allow the standard to sit for a minimum of 5 minutes with gentle agitation prior to making dilutions.

Pipette 200 μL of the Diluent 1X into each tube. Use the stock solution to produce a dilution series (below). Mix each tube thoroughly before the next transfer. The undiluted standard serves as the high standard (700 pg/mL). The Diluent 1X serves as the zero standard (0 pg/mL).

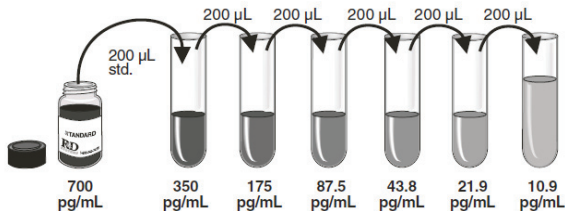

ASSAY PROCEDURE

Bring all reagents and samples to room temperature before use. It is recommended that all samples and standards be assayed in duplicate.

1. Prepare all reagents and working standards as directed in the previous sections.
2. Remove excess microplate strips from the plate frame, return them to the foil pouch containing the desiccant pack, and reseal.
3. Add 50 μ L of Diluent 1X to each well.
4. Add 50 μ L of Standard or sample per well. Cover with the adhesive strip provided. Incubate for 2 hours at room temperature. A plate layout is provided for a record of standards and samples assayed.
5. Aspirate each well and wash, repeating the process three time for a total of four washes. Wash by filling each well with Wash Solution (400 μ L) using a squirt bottle, manifold dispenser, or autowasher. Complete removal of liquid at each step is essential to good performance. After the last wash, remove any remaining Wash Buffer by aspirating or decanting. Invert the plate and blot it against clean paper towels.
6. Add 100 μ L of mouse IL-17 Conjugate to each well. Cover with a new adhesive strip. Incubate for 2 hours at room temperature.
7. Repeat the aspiration/wash as in step 5.
8. Add 100 μ L of Substrate Solution to each well. Incubate for 30 minutes at room temperature. **Protect from light.**
9. Add 100 μ L of Stop solution 2 to each well. The color in the wells should change from blue to yellow. If the color in the wells is green or if the color change does not appear uniform, gently tap the plate to ensure thorough mixing.
10. Determine the optical density of each well within 30 minutes, using a microplate reader set to 450 nm. If wavelength correction is available, set to 540 nm or 570 nm. If wavelength correction is not available, subtract readings at 540 nm or 570 nm from the readings at 450 nm. This subtraction will correct for optical imperfections in the plate. Readings made directly at 450 nm without correction may be higher and less accurate.

CALCULATION OF RESULTS


Average the duplicate readings for each standard and sample and subtract the average zero standard optical density.

Create a standard curve by reducing the data using computer software capable of generating a log-log curve-fit. As an alternative, construct a standard curve by plotting the mean absorbance for each standard on the y-axis against the concentration on the x-axis and draw a best fit curve through the points on the graph. The data may be linearized by plotting the log of the mouse IL-17 concentrations versus the log of the O.D. and the best fit line can be determined by regression analysis. This procedure will produce an adequate but less precise fit of the data.

If samples have been diluted, the concentration read from the standard curve must be multiplied by the dilution factor.

TYPICAL DATA

The standard curve is provided for demonstration only. A standard curve should be generated for each set of samples assayed.

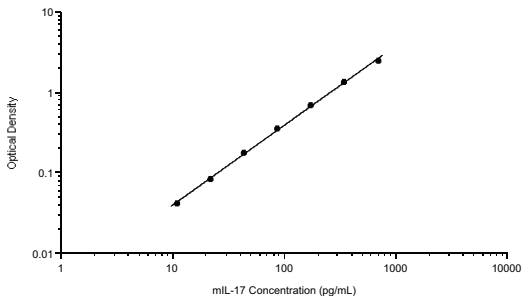

pg/mL	OD	Average	Corrected
0	0.024 0.022 0.066	0.023	—
10.9	0.062 0.106	0.064	0.041
21.9	0.105 0.202	0.106	0.083
43.8	0.191 0.377	0.197	0.174
87.5	0.362 0.708	0.370	0.347
175	0.700 1.409	0.704	0.681
350	1.315 2.415	1.362	1.339
700	2.496	2.456	2.433

TECHNICAL HINTS

- When mixing or reconstituting protein solutions, always avoid foaming.
- To avoid cross-contamination, change pipette tips between additions of each standard level, between sample additions, and between reagent additions. Also, use separate reservoirs for each reagent.
- To ensure accurate results, proper adhesion of plate sealers during incubation steps is necessary.
- Substrate Solution should remain colorless until added to the plate. Keep Substrate Solution protected from light. Substrate Solution should change from colorless to gradations of blue.
- Stop solution 2 should be added to the plate in the same order as the Substrate Solution. The color developed in the wells will turn from blue to yellow upon addition of the Stop solution 2. Wells that are green in color indicate that the Stop solution 2 has not mixed thoroughly with the Substrate

Solution.

PRECISION

Intra-assay Precision (Precision within an assay)

Two samples of known concentration were tested twenty times on one plate to assess intra-assay precision.

Inter-assay Precision (Precision between assays)

Three samples of known concentration were tested in twenty separate assays to assess inter-assay precision.

Sample	Intra assay Precision		Inter assay Precision		
	1	2	1	2	3
n	20	20	20	20	20
Mean (pg/ml)	40.6	432	41.2	51.9	480
Standard Deviation	3.5	26.2	3.7	4.6	40.9
CV (%)	8.6	6.1	9.0	8.9	8.5

RECOVERY

The recovery of mouse IL-17 spiked to different levels in cell culture samples throughout the range of the assay was evaluated.

Sample	Average % Recovery	Range
Cell culture samples (n=6)	94	82 - 110%

SENSITIVITY

The minimum detectable dose of mouse IL-17 is typically less than 1.8 pg/mL.

The minimum detectable dose was determined by adding two standard deviations to the mean optical density value of twenty zero standard replicates and calculating the corresponding concentration.

SAMPLE VALUES

Cell Culture Supernates - Two spleen organ tissues from a mouse were homogenized and seeded in 100 mL of RPMI 1640 supplemented with 10% fetal bovine serum, 2 mM L-glutamine, 100 U/mL penicillin, 100 µg/mL streptomycin sulfate, and 10 µg/mL Con A for 2 days. The cell culture supernate was assayed for mouse IL-17 and measured 3424 pg/mL.

EL-4 cells (Mouse thymoma) were seeded at 2×10^5 cells/mL and cultured for 4 days in 100 mL of DMEM supplemented with 10% horse serum, 10 µg/mL PHA and 10 ng/mL PMA. The cell culture supernate was assayed for mouse IL-17 and measured 17 pg/mL.

LINEARITY

To assess the linearity of the assay, six samples were spiked with high concentrations of mouse IL-17 and diluted with Diluent 1X to produce samples with values within the dynamic range of the assay.

Sample	Dilution	Average % of Expected	Range (%)
Cell culture samples (n=6)	1:2	107	100 - 111
	1:4	109	104 - 119
	1:8	107	95 - 120
	1:16	102	88 - 120

CALIBRATION

This immunoassay is calibrated against highly purified *E. coli*-expressed recombinant mouse IL-17 produced at R&D Systems.

SPECIFICITY

This assay recognizes both natural and recombinant mouse IL-17. The factors listed below were prepared at 50 ng/mL in Diluent 1X and assayed for cross-reactivity. Preparations of the following factors at 50 ng/mL in a mid-range mouse IL-17 standard were assayed for interference. No significant cross-reactivity or interference was observed.

Recombinant Mouse:

IL-17 B (aa 1-180)
 IL-17 B (aa 21-180)
 IL-17 C
 IL-17 D
 IL-17 E
 IL-17 F
 IL-17 BR
 IL-17 RC
 IL-17 RD

There is 66% cross-reactivity observed with recombinant mouse IL-17 A/F Heterodimer.

At concentration 10 ng/mL or greater, mouse IL-17R interferes in this assay.

REFERENCES

1. Gaffen, S. (2009) *Nat. Rev. Immunol.* 9:556.
2. Iwakura, Y. et al. (2008) *Immunol. Rev.* 226:57.
3. Kolls, J.K. & A. Linden (2004) *Immunity* 21:467.
4. Yao, Z. et al. (1995) *J. Immunol.* 155:5483.
5. Kennedy, J. et al. (1996) *J. Interf. Cytokine Res.* 16:611.
6. Liang, S.C. et al. (2007) *J. Immunol.* 179:7791.
7. Chang, S. & C.Dong (2007) *Cell Res.* 17:435.
8. Rouvier, E. et al. (1993) *J. Immunol.* 150:5445.
9. Miljkovic, Dj. Et al. (2003) *Cell. Mol. Life Sci.* 60:518.
10. Witowski, J. et al. (2004) *Cell. Mol. Life Sci.* 61:567.
11. Cua, D.J. & C.M. Tato (2010) *Nat. Rev. Immunol.* 10:479..
12. Shin, H.C. et al. (1998) *Cytokine* 10:841.
13. Yao, Z. et al. (1995) *Immunity* 3:811.
14. Haudenschild, D. et al. (2002) *J. Biol. Chem.* 277:4309.
15. Toy, D. et al. (2006) *J. Immunol.* 177:36.
16. Hu, Y. et al. (2010) *J. Immunol.* 184:4307.
17. Schwarzenberger, P. et al. (2000) *J. Immunol.* 164:4783.
18. Yu, J.J. & S.L. Gaffen (2008) *Front. Biosci.* 13:170.
19. Jovanovic, D.V. et al. (1998) *J. Immunol.* 160:3513.
20. Numasaki, M. et al. (2004) *Immunol. Lett.* 95:97.

ValukineTM ELISA 试剂盒

小鼠IL-17 免疫检测试剂盒

目录号：VAL610

适用于定量测定细胞培养上清液中小鼠IL-17的含量

使用前请仔细阅读产品说明书

科研专用，不可用于临床诊断

目录

简介	3
检测原理	3
检测局限	3
试剂盒组成	4
试剂盒储存	4
实验所需自备试验器材	4
注意事项	5
标本收集及储存	5
检测前准备工作	5
操作步骤	6
计算结果	6
常见结果	7
技术小提示	7
精确度	8
回收率	8
灵敏度	8
样本预值	8
线性	9
校正	9
特异性	9
参考文献	10
96 孔模板图	11

生产:

R&D Systems, Inc.
614 McKinley Place NE
Minneapolis, MN 55413
United States of America

销售和技术支持:

R&D Systems China Co. Ltd.	电话:	+86 (21) 52380373
中国, 上海市, 长宁区	传真:	+86 (21) 52371001
延安西路726号24楼A1座	电邮:	info@RnDSYSTEMSChina.com.cn
邮编: 200050		

简介

小鼠白细胞介素17 (IL-17, 也叫IL-17A, 或CTLA-8)是一个21kDa的不同程度糖基化的多肽,属于IL-17家族,该家族的细胞因子均含有一个半胱氨酸结的折叠(1-3)。人们最初是从由小鼠的细胞毒性细胞和大鼠的T淋巴细胞融合而成的被激活的杂交瘤中分离得到的IL-17(2-5)。小鼠IL-17前体由158个氨基酸组成,包括一个25个氨基酸的信号肽和一个15kDa的133个氨基酸的成熟肽(5)。人和小鼠的IL-17都有一个保守的N端糖基化位点,该位点占了约5kDa的蛋白分子量。IL-17A可形成一个35-38kDa的同源二聚体,或与IL-17F形成一个45-48的异源二聚体(6,7)。成熟的小鼠IL-17A与人和大鼠的IL-17A氨基酸同源性分别为61%和89%(4,5,8)。尽管啮齿类动物和人的成熟IL-17的序列仅有一定程度的同源性,但人的IL-17对小鼠和大鼠的细胞也有活性(5,9)。分泌IL-17的细胞有CD4+Th17 T细胞、帕内特细胞、GRI+CD11b+髓抑制细胞、CD27- γ δ T细胞、CD1+NK1.1-iNKT细胞和CD3-CD4+LTi-样细胞(3,5,6,10-12)。

小鼠IL-17的高亲和受体已有报道,是一种IL-17RA和IL-17RC的异源多聚体,组成比例约为2:1(1)。IL-17RA是一个约130kDa的I型跨膜糖蛋白,且与IL-17、肿瘤坏死因子或免疫球蛋白受体超家族成员没有相似性(2,10,13)。IL-17RC是I型跨膜蛋白,约为90-95kDa,与IL-17A的氨基酸序列同源性仅为30%(14,15)。这两种受体对于IL-17A和IL-17A:F的活性都是必需的。当配体与IL-17RA结合后,这两种受体随后形成功能性结合(1,16)。

IL-17主要参与中性粒细胞的召集和生存(3,10,17,18)。其产生最早被认为是抗原刺激树突细胞的结果,导致IL-23的分泌。在非T细胞受体依赖的情况下,IL-23会刺激T细胞分泌IL-17(3)。分泌的IL-17在骨髓中会刺激基质和成纤维细胞表达G-CSF和膜式干细胞因子,并由此增加PMN的分化和形成。IL-17通过阻断中性粒细胞的凋亡和促进PMN的体内循环,从而起到补充作用(17)。在组织中,主要通过巨噬细胞和内皮细胞的作用,IL-17可促进中性粒细胞的外渗。在巨噬细胞类,IL-17诱导TNF- α 、IL-1 β 和IL-6的产生(19)。TNF- α 和IL-1 β 再作用于内皮细胞,并促进G-CSF的分泌,这一作用通过IL-17得到加强(20)。通过诱导内皮细胞CXC趋化因子和一氧化氮的释放,IL-17起到了促进PMN内流汇集,由此提高了血管的通透性(3,9)。白介素17的效应不仅仅局限于中性粒细胞,在关节部位,IL-17可上调破骨细胞中RANKL的表达量。这对破骨细胞的形成和随后的骨吸收起到了促进作用(18)。

检测原理

本实验采用双抗体夹心ELISA法。抗小鼠IL-17单抗包被于微孔板上,样品和标准品中的IL-17会与固定在板上的抗体结合,游离的成分被洗去;加入辣根过氧化物标记的抗小鼠IL-17多抗,与结合在微孔板上的IL-17结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去;加入底物溶液(显色剂),溶液颜色逐渐变为蓝色,加入终止液2溶液变黄并且停止变化。用酶标仪测定吸光度。

检测局限

- 仅供科研使用,不可用于体外诊断;
- 试剂盒请在有效期内使用;
- 不同试剂盒及不同批号试剂盒的组分不能混用;
- 样本值若大于标准曲线的最高值,应将样本用稀释剂(1 \times)稀释后重新检测;若细胞培养上清液样本需分步稀释,除最后一步用稀释剂稀释外,其它中间稀释可采用细胞培养基;

- 检测结果的不同可由多种因素引起：包括实验人员的操作、移液器的使用方式、洗板技术、反应时间或温度、试剂盒的储存等。

试剂盒组成

名称	规格
包被抗体的96孔聚苯乙烯微孔板/ Mouse IL-17 Microplate, 8孔x12条	1块
酶标检测抗体/ Mouse IL-17 conjugate, 21ml/瓶	1瓶
标准品 (冻干)/ Mouse IL-17 standard, 3.5ng/瓶	1瓶
浓缩稀释剂(5×)/Diluent Concentrate 5X, 21ml/瓶	1瓶
浓缩洗涤液(25×)/Wash Solution Concentrate 25X, 21ml/瓶	1瓶
显色剂 A/ Substrate A, 12.5ml/瓶	1瓶
显色剂 B/ Substrate B, 12.5ml/瓶	1瓶
终止液 2/ Stop Solution 2, 23ml/瓶	1瓶
封板胶纸/ Plate Covers	3张

本试剂盒包含足够的试剂以用于一块 96 孔微孔板的 ELISA 实验

试剂盒储存

未开封试剂盒	2 - 8° C 储存; 请在试剂盒有效期内使用	
已打开, 稀释或重溶的试剂	洗涤液(1×)	2 - 8° C 储存, 30 天*
	终止液 2	
	稀释剂(1×)	
	酶标检测抗体	
	显色剂 A	
	显色剂 B	
	标准品	分装, -20° C 以下冰箱储存 30 天*; 避免反复冻融。
包被的微孔板条	将未用的板条放回带有干燥剂的铝箔袋内, 密封; 2 - 8° C 储存, 30 天*	

*必须在试剂盒有效期内

实验所需自备试验器材

- 酶标仪(可测量450nm检测波长的吸收值及540nm或570nm校正波长的吸收值)
- 高精度加液器及一次性吸头
- 蒸馏水或去离子水
- 洗瓶(喷瓶)、多通道洗板器或自动洗板机
- 500mL 量筒

注意事项

试剂盒中的终止液2是酸性溶液，使用时请做好眼睛、手、面部及衣服的保护。

标本收集及储存

细胞培养上清液：颗粒物应离心去除；立刻检测样本。标本收集后若不及时检测，需按一次使用量分装，冻存于-20℃电冰箱内，避免反复冻融。

检测前准备工作

使用前请将所有试剂放置于室温


洗涤液：从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶，属于正常现象；放置室温，轻摇混匀，待结晶完全溶解后再配制洗涤液。可将20mL浓缩洗涤液用蒸馏水或去离子水稀释配置成500mL工作浓度的洗涤液。未用完的放回4℃。

显色剂：按当次试验所需要用量将显色剂A和显色剂B等体积混合，避光；在使用前15分钟准备，仅供当日使用；每孔需100 μ L。

稀释剂(1 \times)：可将20mL浓缩稀释剂用80mL蒸馏水或去离子水稀释配置成100mL工作浓度的稀释剂。

标准品：用5.0ml稀释剂(1 \times)重溶冻干标准品，得到浓度为700pg/mL标准品母液。轻轻震摇至少5分钟，其充分溶解。

每个稀释管中加入200 μ L稀释剂(1 \times)。将标准品母液参照下图做系列稀释，每管须充分混匀后再移液到下一管。没有稀释的标准品母液可用作标准曲线最高点（700pg/mL），稀释剂(1 \times)可用作标准曲线零点（0pg/mL）。

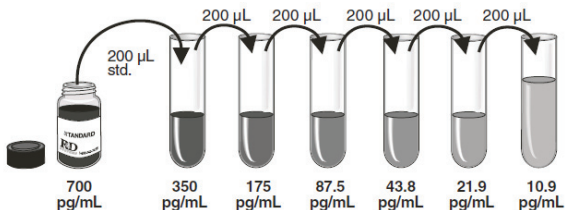

操作步骤

使用前请将所有试剂和样本放置于室温，建议所有的实验样本和标准品做复孔检测

1. 按照上一节的说明，准备好所有需要的试剂和标准品。
2. 从已平衡至室温的密封袋中取出微孔板，未用的板条请放回铝箔袋内，重新封口。
3. 在每个微孔内加入50 μ L稀释剂(1 \times),
4. 分别将实验标本和不同浓度标准品加入相应孔中，每孔50 μ L，用封板胶纸封住反应孔，室温孵育2小时。说明书提供了一张96孔模板图，可用于记录标准品和试验样本的板内位置。
5. 将板内液体吸去，使用洗瓶、多通道洗板器或自动洗板机洗板。每孔加洗涤液400 μ L，然后将板内洗涤液吸去。重复操作4次。每次洗板尽量吸去残留液体会有助于得到好的实验结果。最后一次洗板结束，请将板内所有液体吸干或将板倒置，在吸水纸上拍干所有残留液体。
6. 在每个微孔内加入100 μ L酶标检测抗体。用封板胶纸封住反应孔，室温孵育2小时。
7. 重复第5步洗板操作。
8. 在每个微孔内加入100 μ L显色底物，室温孵育30分钟。**注意避光。**
9. 在每个微孔内加入100 μ L终止液2，孔内溶液颜色会从蓝色变为黄色。轻拍微孔板，使溶液混合均匀。
10. 加入终止液2后30分钟内，使用酶标仪测量450nm的吸光度值，设定540nm或570nm作为校正波长。如果没有使用双波长校正，结果准确度可能会受影响。

计算结果


每一个标准品及样本的复孔校正吸光值(OD450-OD540/OD570)取平均值，再减去标准曲线零点的OD值。

利用酶标仪携带的软件，绘制一个log-log线性标准曲线，曲线横坐标为标准曲线点的小鼠IL-17浓度值，纵坐标为标准曲线点的OD平均值。通过样本的OD值，可从标准曲线上得到样本中小鼠IL-17的浓度。

若样本经过稀释，计算浓度时应乘以稀释倍数。

常见结果

提供的标准曲线数据仅供参考，应根据同次试验所绘标准曲线计算样本含量。

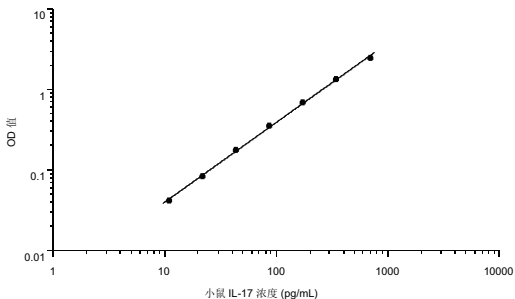

pg/mL	OD 值	平均值	校正值
0	0.024	0.023	—
	0.022		
	0.066		
10.9	0.062	0.064	0.041
	0.106		
21.9	0.105	0.106	0.083
	0.202		
43.8	0.191	0.197	0.174
	0.377		
87.5	0.362	0.370	0.347
	0.708		
175	0.700	0.704	0.681
	1.409		
350	1.315	1.362	1.339
	2.415		
700	2.496	2.456	2.433

技术小提示

- 当混合或重溶蛋白溶液时，尽量避免起沫；
- 为了避免交叉污染，配置不同浓度标准品、上样、加不同试剂都需要更换枪头。另外不同试剂请分别使用不同的移液槽；
- 每次孵育时，正确使用封板胶纸可保证结果的准确性；

- 混合后的显色底物在上板前应为无色，请避光保存；加入微孔板后，将由无色变成不同深度的蓝色；
- 终止液2上板顺序应同显色底物上板顺序一致；加入终止液2后，孔内颜色由蓝变黄；若孔内有绿色，则表明孔内液体未混匀；请充分混合。

精确度

板内精确度 (同一板内不同孔间的精确度)

已知浓度的两个样本，在同一板内分别检测20次，以确定板内精确度。

板间精确度 (不同板之间的精确度)

已知浓度的三个样本，在不同板间分别检测20次，以确定板间精确度。

样本	板内精确度		板间精确度		
	1	2	1	2	3
样本数(n)	20	20	20	20	20
平均值 (pg/mL)	40.6	432	41.2	51.9	480
标准差	3.5	26.2	3.7	4.6	40.9
CV (%)	8.6	6.1	9.0	8.9	8.5

回收率

在细胞培养基样本中掺入不同水平的小鼠IL-17，测定其回收率。

样本类型	平均回收率(%)	范围(%)
细胞培养基样本 (n=6)	94	82 - 110%

灵敏度

小鼠IL-17的最低可测值一般小于1.8 pg/mL。

最低可测值是根据20个标准曲线零点吸光值的平均值加两倍标准差计算得到的相对应浓度。

样本预值

细胞培养上清液 - 从两个小鼠脾脏组织匀浆得到的原代细胞培养于100mL的RPMI1640培养基中，细胞培养基还含有10%胎牛血清、2mM L-谷氨酰胺、100 U/mL 青霉素，100 µg/mL硫酸链霉素，10 µg/mL

Con A, 培养2天。取细胞培养上清液测定小鼠IL-17含量, 结果为3424 pg/mL。
EL-4细胞(小鼠胸腺瘤)以 2×10^5 细胞/mL植培, 培养4天; 培养基为100mL的DMEM含有10%马血清、10 μ g/mL PHA和10 ng/mL PMA。取细胞培养上清液测定小鼠IL-17含量, 结果为17 pg/mL。

线性

6个不同的样本中掺入高浓度的小鼠IL-17, 然后用稀释剂(1 \times)将样本稀释到检测范围内, 测定其线性。

样本	稀释倍数	平均值/期待值 (%)	范围 (%)
细胞培养基样本 (n=6)	1:2	107	100 - 111
	1:4	109	104 - 119
	1:8	107	95 - 120
	1:16	102	88 - 120

校正

此ELISA试剂盒经由R&D Systems生产的大肠杆菌表达的高纯重组小鼠IL-17蛋白所校正。

特异性

此ELISA法可检测天然及重组小鼠IL-17蛋白。将以下因子用稀释剂(1 \times)配置成50ng/mL的浓度来检测与小鼠IL-17的交叉反应。将干扰因子掺入中间浓度小鼠IL-17标准品中, 使其浓度到达50ng/mL, 以此来检测对小鼠IL-17的干扰。没有观察到明显的交叉反应或干扰。

重组小鼠蛋白:

IL-17 B (aa 1-180)
IL-17 B (aa 21-180)
IL-17 C
IL-17 D
IL-17 E
IL-17 F
IL-17 BR
IL-17 RC
IL-17 RD

小鼠 IL-17 A/F 异源二聚体存在 66%的交叉反应

小鼠 IL-17 R 浓度大于 10 ng/mL 时, 会对检测造成影响

参考文献

1. Gaffen, S. (2009) *Nat. Rev. Immunol.* 9:556.
2. Iwakura, Y. et al. (2008) *Immunol. Rev.* 226:57.
3. Kolls, J.K. & A. Linden (2004) *Immunity* 21:467.
4. Yao, Z. et al. (1995) *J. Immunol.* 155:5483.
5. Kennedy, J. et al. (1996) *J. Interf. Cytokine Res.* 16:611.
6. Liang, S.C. et al. (2007) *J. Immunol.* 179:7791.
7. Chang, S. & C.Dong (2007) *Cell Res.* 17:435.
8. Rouvier, E. et al. (1993) *J. Immunol.* 150:5445.
9. Miljkovic, Dj. Et al. (2003) *Cell. Mol. Life Sci.* 60:518.
10. Witowski, J. et al. (2004) *Cell. Mol. Life Sci.* 61:567.
11. Cua, D.J. & C.M. Tato (2010) *Nat. Rev. Immunol.* 10:479..
12. Shin, H.C. et al. (1998) *Cytokine* 10:841.
13. Yao, Z. et al. (1995) *Immunity* 3:811.
14. Haudenschild, D. et al. (2002) *J. Biol. Chem.* 277:4309.
15. Toy, D. et al. (2006) *J. Immunol.* 177:36.
16. Hu, Y. et al. (2010) *J. Immunol.* 184:4307.
17. Schwarzenberger, P. et al. (2000) *J. Immunol.* 164:4783.
18. Yu, J.J. & S.L. Gaffen (2008) *Front. Biosci.* 13:170.
19. Jovanovic, D.V. et al. (1998) *J. Immunol.* 160:3513.
20. Numasaki, M. et al. (2004) *Immunol. Lett.* 95:97.

96孔模板图

请使用96孔模板图来记录标准品及样本在板内的位置

